



ES

WKB002  
Manual de instrucciones  
WE-2020-WKB002-1

# PRESOTERAPIA Y TERMOTERAPIA

## ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

• No utilice el equipo con mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, pacientes con dispositivo de control de ritmo cardíaco (marcapasos) o pacientes con una infección cutánea.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

## RECICLAJE



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

## ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.



La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	CANT
1	PIERNA DERECHA	1
2	PIERNA IZQUIERDA	1
3	BRAZO DERECHO	1
4	BRAZO IZQUIERDO	1
5	PIE DERECHO	1
6	PIE IZQUIERDO	1
7	CINTURA	1
8	MANTA CABLES	1
9	TUBOS	1
10	UNIDAD PRINCIPAL	1
11	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	1

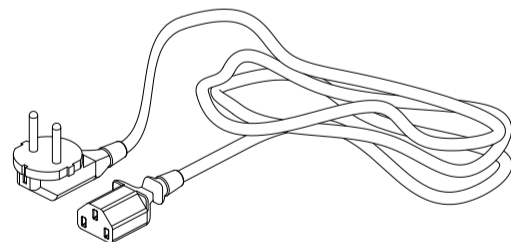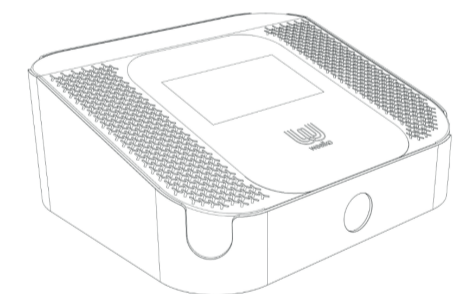

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación en el panel trasero.


2. Conecte correctamente los tubos en el panel trasero. Siga las indicaciones numéricas. Los cables finos del 1 al 5 son para la función termoterapia y los cables gruesos del 0 al 9 son para la presoterapia.

3. Coloque la manta con los cables en una superficie plana para que el paciente pueda tumbarse. Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.

4. Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje de la presoterapia.

5. Encienda el botón en el panel frontal y haga clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados.

6. Seleccione en el menú si quiere la función "presotherapy" para la presoterapia y "far infrared" si quiere utilizar la función termoterapia.

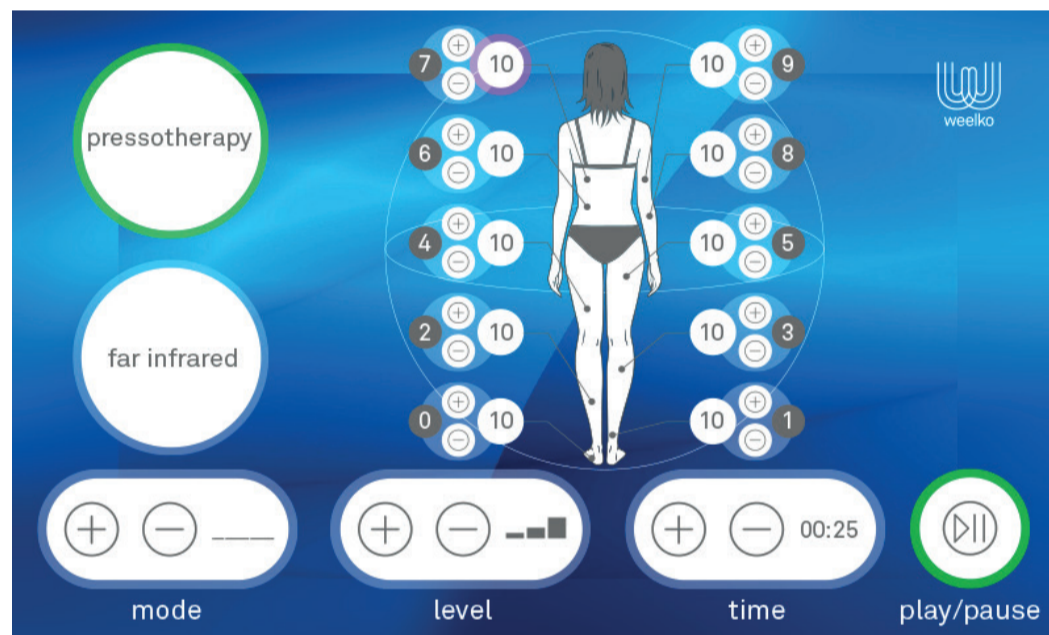

7. En la función de presoterapia, el menú "MODE" permite escoger uno de los cuatro programas. Se recomienda empezar por el programa C y después escoger los otros programas según las necesidades del paciente.

• El programa A infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 1 y desinfla la 1 cuando se infla la 2, así sucesivamente de una extremidad a otra. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

• El programa B infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 2 y desinfla la 1 cuando se infla la 3, y así sucesivamente de un lado al otro. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

• El programa C infla de la zona 0 a la 9. Empieza a inflar por la zona 0 y añade la zona 1, seguido de la 2 y así sucesivamente va añadiendo zonas al proceso de inflado. Al final, repite el programa.

• El programa D infla las tres zonas a la

vez: piernas, abdomen y brazos desde la extremidad hasta la parte superior.

Si prefiere trabajar zonas independientes sin utilizar ningún programa, el equipo permite escoger cada parte del traje y regular su intensidad de hinchado independientemente. Solamente debe pulsar el botón de la zona y regular la intensidad por medio de las teclas "+" y "-".

El menú "LEVEL" permite regular la intensidad del hinchado en tres niveles.

El menú "TIME" permite escoger el tiempo de tratamiento. El programa predeterminado es de 30 minutos.

8. En la función de termoterapia, el equipo cuenta con 5 zonas de tratamiento que permiten regular la temperatura de forma independiente. También el menú "TIME" para regular el tiempo de tratamiento. El programa predeterminado es de 30 minutos.

7. Seleccione "PLAY/PAUSE" para empezar o pausar el tratamiento.

## MANTENIMIENTO

• Utilice un protector de celulosa bajo el traje de presoterapia para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.

• Conecte y desconecte los tubos con cuidado para alargar su vida útil. De todas formas, el equipo prevé una manta para almacenar los cables con el fin de evitar conectar y desconectar los cables cada vez. Conecte y desconecte solamente el cable general de la parte trasera.

• Limpie el traje con un trapo húmedo después de cada tratamiento.

• No deje el traje calentándose sin ningún paciente dentro.

• Tras un tratamiento de termoterapia, abra el traje para eliminar el calor acumulado durante el tratamiento.

## PRECAUCIÓN

• Tenga la precaución de no apretar demasiado el traje al cuerpo del paciente, para evitar hacerle daño si la presión del aire es muy fuerteconectados correctamente.

• Si la superficie de la manta está rota o envejecida, por favor, sustitúyala por una manta nueva, para evitar quemaduras accidentales de la piel o descargas eléctricas.

• Compruebe con el paciente a lo largo del tratamiento que la temperatura es la adecuada.

• Se recomienda que el paciente beba mucha agua antes y después del tratamiento.

## ACCESORIOS

PIERNA DERECHA
PIERNA IZQUIERDA
BRAZO DERECHO
BRAZO IZQUIERDO
CINTURA
PIE DERECHO
PIE IZQUIERDO
TUBOS

## FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	66x45x40
	Peso bruto (Kg)	18,5
	Tamaño consola (cm)	34x38x15
Características de trabajo	Potencia de trabajo	350 W
	Presión de aire	0-0,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Flujo de aire	0,40 L/min.
	Ritmo de la presión aire	0-15 s.
	Canales de aire	10 (20 cámaras)
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	350 W



EN

WKB002  
Instruction Manual  
WE-2020-WKB001-1

# PRESSOTHERAPY & THERMOTHERAPY



incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

## PACKAGE CONTENTS


- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	QTY.
1	RIGHT LEG	1
2	LEFT LEG	1
3	RIGHT ARM	1
4	LEFT ARM	1
5	RIGHT FOOT	1
6	LEFT FOOT	1
7	WAIST	1
8	CABLE BLANKET	1
9	TUBES	1
10	MAIN UNIT	-
11	FEEDER CABLE	-

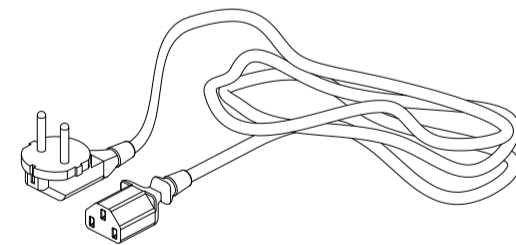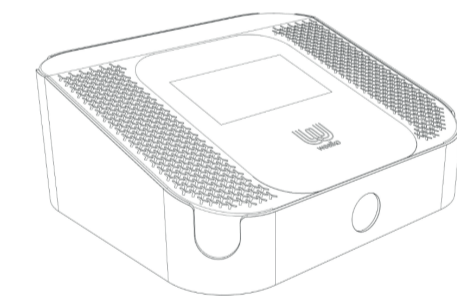

## INSTRUCTIONS OF USE

1. Connect the power cord via the rear panel.
2. Connect the tubes properly to the rear panel. Follow the numerical instructions. Thinner cables from 1 to 5 are used for thermotherapy and thicker cables from 0 to 9 are used for pressotherapy.
3. Place the blanket with the cables on a flat surface so that the patient can lay down on it. Cover the blanket with disposable paper to ensure the best hygienic conditions.
4. Wrap the suit around the user's body. Remember to use a disposable garment underneath the pressotherapy suit.
5. Turn on the power button on the front panel and click on Weelko logo to select the desired menus.
6. Select "pressotherapy" for pressotherapy treatments or "far infrared" for thermotherapy treatments.

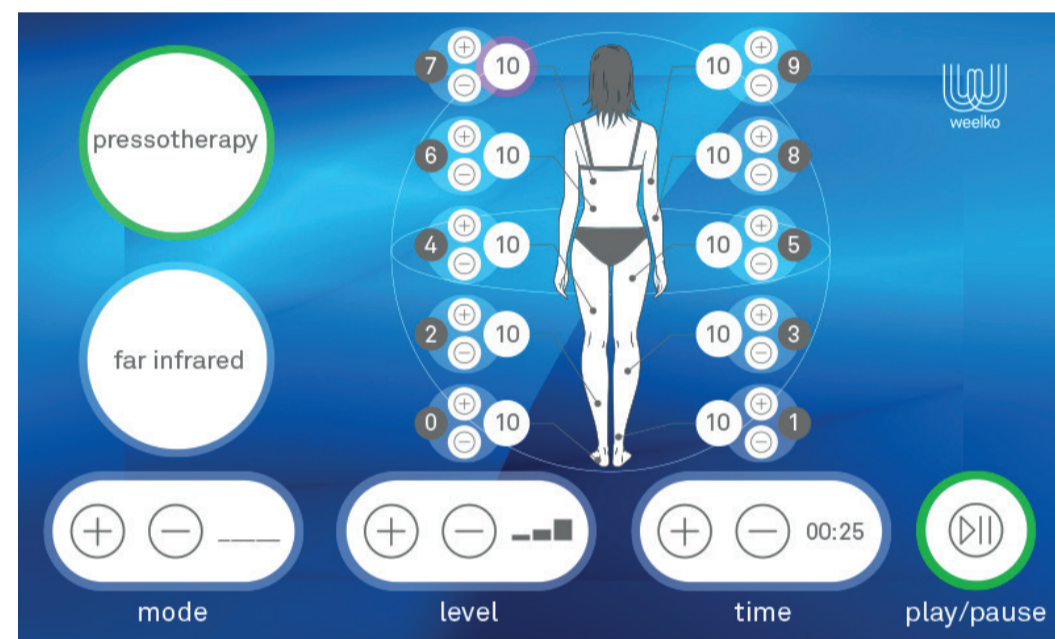

7. In the pressotherapy function, the "MODE" menu allows you to choose between four programs. It is recommended to start with C and to select the other programs depending on patient's needs.

- Mode A fills with air sections from 0 to 9. Section 0 is deflated when section 1 is inflated. Section 1 is deflated when section 2 is inflated and so on from one section to another. At the end of the program, sections from 0 to 9 are inflated at the same time and the program starts again.

- Mode B fills with air sections from 0 to 9. Section 0 is deflated when section 2 is inflated. Section 1 is deflated when section 3 is inflated and so on from one side to another. At the end of the program, sections from 0 to 9 are inflated at the same time and the program starts again.

- Mode C fills with air sections from 0 to 9. First section 0 is inflated, then section 1, later section 2 and so on through all sections. At the end, the program starts again from section 0.

- Mode D fills with air the three sections at the same time: legs, abdomen and arms from bottom to top.

If you don't want to use a concrete mode, the device allows to choose sections separately and to adjust the inflation intensity of each section. You just need to press the area you want to treat and adjust its intensity by using the buttons "+" and "-".

8. The "LEVEL" menu allows to adjust 3 inflation intensity levels.

9. The "TIME" menu allows to adjust the treatment time. The default duration is 30 minutes.

10. 10. In the thermotherapy function, the device is equipped with 5 treatment sections. Temperature can be adjusted separately in each section. The "TIME" menu is used to adjust the treatment time. The default duration is 30 minutes.

11. Press "PLAY/PAUSE" to begin or pause the treatment.

## MAINTENANCE

- Use a cellulose protector underneath the pressotherapy suit to ensure the best hygienic conditions.

- Connect and disconnect the tubes carefully to extend the product lifetime. However, this device is supplied with a blanket to store the cables so that they are all connected and disconnected at the same time. Only the general power cord at the rear part of the device should be connected and disconnected.

- After use, clean the suit with a wet cloth.

- Never leave the suit heating with nobody inside.

- After a thermotherapy treatment, open the suit to remove stored heat during the treatment.

## CAUTIONS

- Be careful not to wrap the airbag too tight, to avoid hurting the users when the air is too strong.

- If the surface of the blanket is broken or aging, please replace it with a new blanket to prevent accidental skin burns or electric shocks.

- During the treatment, check with the patient if the temperature is appropriate.
- It is recommended for the patient to drink plenty of water before and after treatment to avoid dehydration and heatstroke.

## ACCESSORIES

RIGHT LEG
LEFT LEG
RIGHT ARM
LEFT ARM
WAIST
RIGHT FOOT
LEFT FOOT
TUBES

## TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	66x45x40
	Gross weight (kg)	18,5
	Product size (cm)	34x38x15
Working characteristics	Working power	350 W
	Air pressure	0-0,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Air flow	0,40 L/min.
	Rhythm of air pressure	0-15 s.
	Air channels	10 (20 bags )
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	350 W

## WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

- Do not use on pregnant women, on people with pace-makers (any electrical or rhythmic heart-regulating device) or with skin infections.

## EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

## RECYCLING

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

## WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to